

Avföringsprov för bakterie + parasitundersökning - Information till vårdenhet

Förberedelser


Material:

Provtagningsset flytande för bakterier (eSwab).

Pinne med flockad top, rosa skruvlock. Artikelnummer: [48245](#)

Rent engångsskål för uppsamling av feces.

Rör konisk med sked, brunt skruvlock. Artikelnummer: [44927](#)

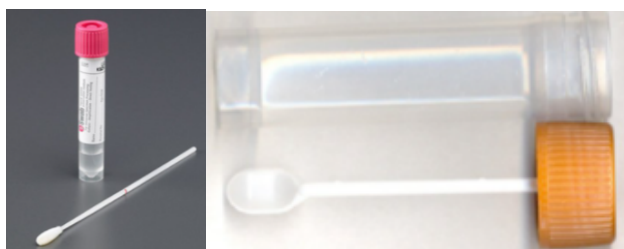

Provtagning i rör eSwab

Använd rent engångsskål för uppsamling av feces.

När patienten lämnat avföring:

- Ta ett provtagningsset (bomullspinne och transportrör) [48245](#) och öppna förpackningen.
- Märk provtagningsröret med BoS-etikett.
- Pinnen doppas ned i feces och måste vara väl genomdränkt med fecesmaterial. (Mängd avföring = som en liten ärtä). Stoppa därefter ned pinnen i transportmediet och bryt av pinnen vid markeringen. Skruva fast locket och se till att det sluter tätt.
- Ange korrekt provtagningstid (datum och klockslag) i Cosmic.
Glöm inte skicka remissen.
- Om flera prov ska lämnas, upprepa provtagningen vid nästa tarmtömning och gör likadant med nästa provtagningsset.
- Lämna in provtagningsrör till laboratoriet snarast, senast inom 2 dagar efter provet tagits. Provet/proven ska förvaras i kyla.

Om patienten ej kan lämna prov:

Om patienten ej kan lämna prov erhålls som regel tillräcklig provmängd vid rektalpalpation. Prov kan eventuellt också tas direkt på provtagningspinne från ändtarmen. Provtagningspinnen måste vara väl genomdränkt med fecesmaterial



Provtagning i rör med sked

Använd rent engångskärl för uppsamling av feces.

När patienten lämnat avföring:

- Märk provtagningsröret **44927** med BoS-etikett.
- Använd skeden i locket för att samla en sked avföringsmaterial.
(Mängd avföring = som en liten ärtä). Stoppa därefter ned skeden i transportburken.
- Skruva fast locket och se till att det sluter tätt.
- Ange korrekt provtagningsstid (datum och klockslag) i Cosmic.
Glöm inte skicka remissen.
- Om flera prov ska lämnas, upprepa provtagningen vid nästa tarmtömning och gör likadant med nästa provtagningsburk.
- Lämna in provtagningsburken till laboratoriet snarast, senast inom 2 dagar efter provet tagits. Provet/proven ska förvaras i kyla.